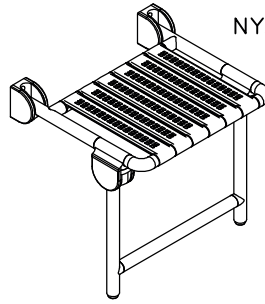




**Montageanleitung**  
**Fixing instructions**  
**Notice de montage**  
**Montage handleiding**



NY.457.811

Klappsitz Serie 457 Adipositas  
Lift-up shower seats series 457 Adipositas  
Sièges de douche rabattables Série XXL  
Opklapbaar hangzitjes reeks serie 457 Obesitas

NORMBAU GmbH  
77871 Renchen/Germany · Schwarzwaldstraße 15

EDV-Nr. 8214 315/A2 16.10.2018

**DE**  
Verankerungsgrund prüfen und Befestigungsmaterial festlegen.  
Max. zul. Belastung auf dem Produkt 300 kg.  
Die Befestigungsmaße entsprechen der DIN 18 040 oder sind Empfehlungen.  
Zur optimalen Unterstüztung sind die angegebenen Maße je nach Körpergröße und Art der Einschränkung entsprechend anzupassen.  
Zu berücksichtigen sind weiterhin die örtlichen Gegebenheiten.

**Pflegehinweis:**  
Reinigung mit weichem, feuchtem Tuch, evtl. mit handelsüblichen Spülmitteln.  
Keine scheuernden oder stark säurehaltigen Reinigungsmittel verwenden !

Die Gewährleistung beträgt entsprechend der derzeitigen gesetzlichen Regelung 2 Jahre.

**Die Montage ist vom Fachmann auszuführen. Bei nicht fachgerechter Montage oder nicht sachgemäßer Verwendung wird von NORMBAU keine Haftung für Folgeschäden übernehmen.**

**GB**  
Verify anchoring base and select fixings accordingly.  
Max. loading of 300 kgs for this product.  
The fixing measurements correspond to German standard DIN 18 040 or are recommendations. For optimal support adapt the indicated measurements to corresponding body size and disability. Furthermore, site conditions have to be considered.

**Recommendation for cleaning:**  
Please clean with a soft, damp cloth. If necessary use only mild detergent, but NOT scouring or strong acidic cleaners.

The current warranty is 2 years.

**The fixing has to be done by skilled workers only. If fixing has not been done professionally, NORMBAU will not accept liability for any subsequent damages.**

**FR**  
Analyser la composition du support et déterminer le matériel de fixation. La fixation doit être effectuée par un professionnel. La charge maximale est de 300 kg.  
Les cotes de fixation correspondent à des recommandations de mise en oeuvre pour des bâtiments d'habitation collectifs. Ces cotes sont à adapter en fonction de la taille et de l'handicap des personnes qui utilisent les produits. Il est également nécessaire de les adapter à la configuration des lieux.

**Conseils d'entretien:**  
Nettoyage avec un chiffon doux humide, éventuellement avec des produits de nettoyage ou de désinfection courants. Ne pas utiliser de produits à récurer ou d'acides!

**La fixation doit être effectuée par un professionnel. En cas de fixation inadaptée ou d'un usage non conforme, NORMBAU n'assure aucune garantie pour ce produit ou les dommages qui pourraient en résulter.**

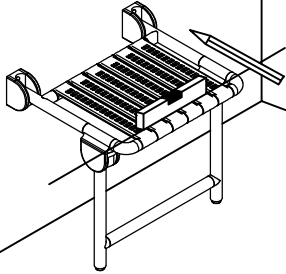
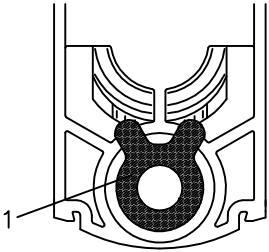
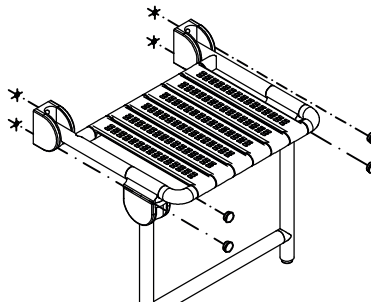
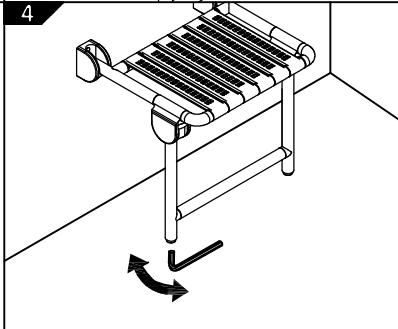
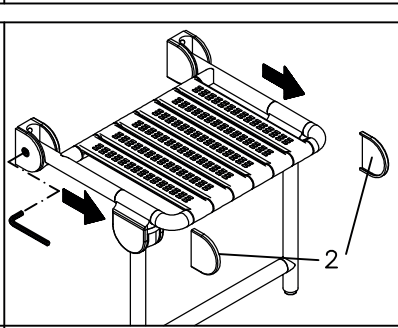
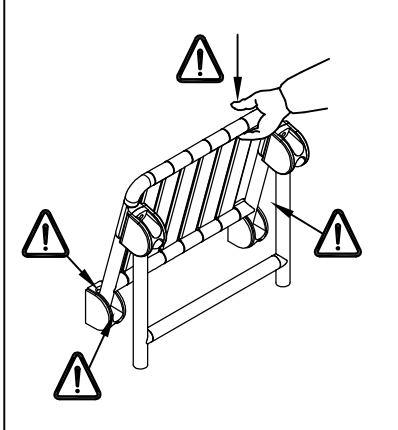
**NL**  
Kies aan de hand van het materiaal de juiste bevestiging. Max. toelaatbaar belasting op het product: 300 kgs. De bevestigingsmaten voldoen aan Duitse standaard DIN 18 040 of zijn een advies. Voor een optimale ondersteuning zijn de aangegeven maten afhankelijk van de lichaamsgroote of andere veranderingen aan te passen. In acht te nemen zijn dan ook de plaatselijke mogelijkheden.

**Onderhoudsadvies:**  
Reinigen met een zachte, vochtig doek eventueel met een afwasmiddel in de handel verkrijgbaar. Geen schuurmiddelen of sterk zuurhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.

De garantie bedraagt volgens de geldende regels 2 jaar.

**De montage dient door een vakman te gebeuren. Bij niet montage door een specialist kan de aansprakelijkheid voor eventuele gevolgschade niet verhaald worden bij NORMBAU.**

<b>DE</b> <b>GB</b>	Verankerungsgrund Anchoring base	Befestigungsmaterial Fixing material	<b>FR</b> <b>NL</b>	support Bevestigingsondergrond	Matériel de fixation Bevestigingsmateriaal
<b>DE</b> NORMBAU Montageset, MS 4.8 H14 komplett für Wände aus: -Kalksandlochstein KSL ≥12 -Beton ≥B15, -Vollziegel ≥Mz12, -Kalksand-Vollstein ≥KS 12, -Naturstein mit dichtem Gefüge Bohrloch Ø20x105mm	<b>GB</b> NORMBAU Fixing set, MS 4.8 H14 complete for walls made of: -Cavity brick KSL ≥12, -Concrete ≥B15, -Solid brick ≥Mz12, -Sand-lime brick ≥KS 12, -Natural stone with compact grain Drill hole Ø20x105mm	1 Injektions-Kartusche mit Verbundmörtel 145 cm <sup>3</sup> 4 Innengewindehülsen aus Stahl Ø15x75/M10 4 Metall Siebhülsen Ø20x100 4 Sechskantschrauben M10x20 aus Edelstahl A4	<b>FR</b> NORMBAU Kit de montage, MS 4.8 H14 complet pour murs en: -Brique silico-calcaire creuse KSL ≥12 -Béton ≥B15 -Brique pleine ≥Mz 12 -Brique silico-calcaire pleine ≥KS 12 -Pierre naturelle avec une structure solide. Perçage Ø20 x 105 mm	<b>NL</b> NORMBAU Montageset, MS 4.8 H14 compleet voor wanden van: -Holle betonkorresteen KSL ≥12 -Beton ≥B15 -Volle baksteen ≥Mz 12 -Kalkzand-volsteen ≥KS 12 -Natuursteen met dichte structuur Borngen Ø20 x 105 mm	1 cartouche d'injection avec du mortier de scellement 145 cm <sup>3</sup> 4 douilles métalliques filetées Ø15x75 /M10 4 tamis d'injection métalliques Ø20x100 4 vis à six pans - M10 x20 en Inox classe A4
<b>DE</b> NORMBAU Montageset, MS 4.8 C4 für Leichtbauwände aus Gipskarton, Spanplatte oder Hartfaserplatte mit Hinterfüllung aus min. 20mm dickem Hartholz oder wasserfester Schlichtholzplatte. Die Holzplatte muss an einer tragenden Wand/Ständerwand befestigt sein.	<b>GB</b> NORMBAU Fixing set, MS 4.8 C4 for gypsum, flake board or hardboard with backfill made of min. 20mm thick hardwood or fixing in front of the wall with integrated mounting plate made of water resistant hardwood. The hardwood plate has to be fixed to a main or structural wall.	4 Sechskant-Holzschrauben Ø10x80 (SW 17) aus Edelstahl A4	<b>FR</b> NORMBAU Kit de montage MS 4.8 C4 pour cloisons légères en placoplâtre, planches d'aggloméré ou panneaux en fibres dures, avec un renfort en bois dur de 20 mm d'épaisseur minimum, intégré dans la cloison au niveau des points de fixation lors du montage de la cloison ou rajouté de l'autre côté de la cloison en cas de cloison déjà existante. La plaque de renfort doit être fixée sur un mur ou un élément porteur.	<b>NL</b> NORMBAU montageset, MS 4.8 C4 aan lichte wanden met bekledingsplaat uit gipskarton, spaanplaat, MDF op en dergelijke met een vulling uit ten minste 20mm dikke meervoudig vertijmt hout of bij bevestiging frontaal op de muur met een gelintegreede bevestigingsplaat van hardhout. De hardhout plaat moet aan een dragende wand/steunwand bevestigd worden.	4 vis à bois à six pans Ø10x80 mm (SW 17) en inox classe A4

<p><b>DE</b></p> <p>Klappsitz mit eingerastetem Stützfuß an Wand halten und mit Wasserwaage horizontal ausrichten.</p> <p>Bohrlöcher anzeichnen.</p> <p><b>GB</b></p> <p>Hold seat with latched foothold against the wall and align it horizontal with a spirit level.</p> <p>Mark drill holes.</p>	<p><b>1</b></p> 	<p><b>FR</b></p> <p>Positionner le siège, pied enclenché en position verticale, contre le mur. Aligner à l'aide d'un niveau à bulle.</p> <p>Marquer les points de fixation.</p> <p><b>NL</b></p> <p>Opklapbare zitting met vloersteun waterpas tegen de muur plaatsen.</p> <p>Boorgaten markeren.</p>
<p><b>DE</b></p> <p><b>Nur bei Montage mit Verbundmörtel:</b> Für die Siebhülse muss die Distanzscheibe (1) an der Unterseite des Scharniers entfernt werden! Beim Auspressen vom Verbundmörtel werden die 4 Siebhülsen mit je 17 Teilstrichen gefüllt.</p> <p><b>GB</b></p> <p><b>For fixing with chemical mortar only:</b> Remove the spacer (1) from the rear of the hinge. When injecting the chemical mortar the perforated sleeves will be filled with 17 units (see scale).</p>	<p><b>2</b></p> 	<p><b>FR</b></p> <p><b>Uniquement en cas de montage avec mortier de scellement:</b> Pour une utilisation avec un tamis d'injection métallique, le disque d'espacement (1) situé sous la charnière doit être retiré! Presser 17 unités de mortier de scellement pour remplir chacun des quatre tamis d'injection métalliques.</p> <p><b>NL</b></p> <p><b>Alleen bij montage met verbindingsmörtel:</b> Voor de zeef huls moet de afstandsschijf (1) aan de onderzijde van de scharnieren verwijderd worden. Bij het uitzetten van de verbindingsmörtel worden de zeef hulzen met 17 delen gevuld.</p>
<p><b>DE</b></p> <p>Klappsitz je nach Befestigungsart mit geeignetem Befestigungsmaterial anschrauben, dazu beiliegende U-Scheiben verwenden. Abdeckkappen eindrücken.</p> <p><b>GB</b></p> <p>Fasten lift-up shower seat with suitable fixing material, use washer supplied. Clip on covers.</p>	<p><b>3</b></p> 	<p><b>FR</b></p> <p>Fixer le siège de douche à l'aide du matériel de fixation adapté au support en utilisant les rondelles jointes. Enfoncer les cache-vis.</p> <p><b>NL</b></p> <p>Opklapbare zitting afhandelijke van de montage wijze met de daartoe behorende bevestigingsmaterialen vast schroeven, en de bijbehorende onderleg schijven gebruiken. Afdekkappen plaatsen.</p>
<p><b>DE</b></p> <p>Einstellung der Sitzneigung durch Drehen des Puffers mit Innensechskantschlüssel SW8.</p> <p><b>GB</b></p> <p>Adjust tilting of the lift-up shower seat by turning the cushion with the Allen key SW 8.</p>	<p><b>4</b></p> 	<p><b>FR</b></p> <p>Pour un réglage précis du pied, tourner la butée à l'aide d'une clé à six pans creux SW8.</p> <p><b>NL</b></p> <p>De stelpoten gelijkmatig stellen met Imbus SW 8.</p>
<p><b>DE</b></p> <p><b>Einstellung der Bremswirkung:</b> Falls erforderlich kann die Bremswirkung eingestellt werden. Äußere Abdeckkappe (2) nach vorne abziehen. Mit Innensechskantschlüssel SW4 Schraube anziehen oder lösen, bis der Sitz langsam und gleichmäßig herunterklappt. Abdeckkappe (2) wieder aufschieben.</p> <p><b>GB</b></p> <p><b>Adjustment of automatic built-in stop:</b> If required, the automatic built-in stop can be adjusted. Remove the outer cover (2). Tighten respectively loose the screw SW4 with an allen key until the seat turns down slowly and steadily. Put the outer cover (2) back on.</p>		<p><b>FR</b></p> <p><b>Réglage du système de freinage:</b> Si nécessaire, le réglage du système de freinage du siège peut être modifié. Retirer les caches latéraux (2) en les tirant vers l'avant, serrer ou desserrer la vis à l'aide d'une clé à six pans SW 4 jusqu'à ce que le siège puisse descendre de manière lente et régulière.</p> <p><b>NL</b></p> <p><b>Instelling van de remwerking:</b> Indien nodig kan de remwerking ingesteld worden. Buitenste afdekkap (2). Met zeskant sleutel SW4 schroef aandraaien of losser draaien, tot de zitting langzaam en gelijkmatig naar beneden klapt.</p>
<p><b>DE</b></p> <p><b>Warnhinweise:</b> ⚠</p> <p>Beim Herunterklappen des Sitzes ist darauf zu achten, dass die Finger nicht unten im Scharnier gequetscht werden.</p> <p>Beim Heraufklappen des Sitzes ist darauf zu achten, dass die Finger nicht zwischen Sitz und Wand oder im Scharnier gequetscht werden.</p> <p><b>GB</b></p> <p><b>Attention:</b> ⚠</p> <p>When turning the seat down please take care that your fingers are not squashed in the hinge.</p> <p>When turning the seat up please take care that your fingers are not squashed between the seat and the wall or in the hinge.</p>		<p><b>FR</b></p> <p><b>Attention:</b> ⚠</p> <p>Il faut veiller à ne pas se coincer les doigts sous la charnière en descendant le siège.</p> <p>En remontant le siège, il faut veiller à ne pas se coincer les doigts dans le haut des charnières ou entre le siège et le mur.</p> <p><b>NL</b></p> <p><b>Waarschuwing:</b> ⚠</p> <p>Bij het naar beneden klappen van de zitting moet men erop letten, dat je vinger niet onder het scharnier geklemd wordt.</p> <p>Bij het naar boven klappen van de zitting moet men erop letten, dat je vinger niet tussen de zitting en de wand of in het scharnier geklemd wordt.</p>