

Nylon Care Barre d'appui rabattable vario

Numéro d'article: 3500430018


### Image du produit



### Spécifications techniques

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Groupe de produits | 3800                                  |
| Produit            | Barre d'appui rabattable              |
| System             | vario, avec platine de fixation       |
| Longueur           | 725 mm                                |
| Diamètre           | 34 mm                                 |
| Matériau           | polyamide, plaque de fixation en inox |
| Surface            | haute brillance                       |
| Couleur            | livrable en coloris Nylon             |
| Version            | à gauche et à droite                  |
| Charge             | max. 100 kg                           |

### Dessin technique

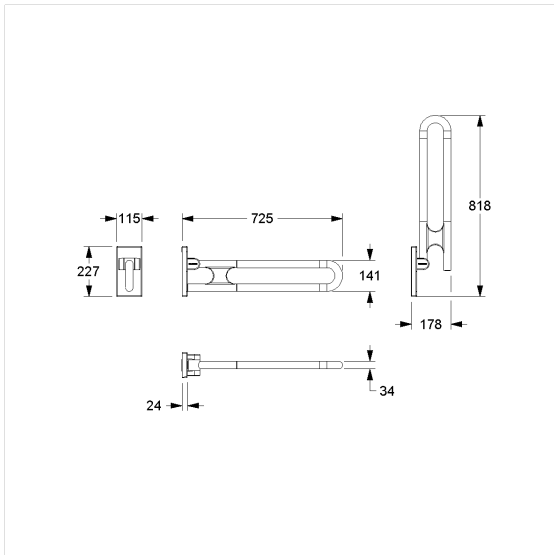

### Description produit

- Nylon Care en tant que famille de produits éprouvée avec une grande diversité de variantes grâce à trois séries répondant aux exigences les plus diverses
- Avec système de freinage réglable
- Avec une technique de palier lisse robuste et sans entretien
- Avec noyau continu en acier anti-corrosif
- faible encombrement grâce à sa forme compacte
- Montage/démontage simple et rapide, la barre d'appui s'accroche sur la platine de fixation
- Fixation invisible
- étanchéification des points de perçage conformément aux normes (DIN 18534-1) en combinaison avec les kits de fixation NORMBAU 7470xxx
- Pour les cloisons légères, une doublure en bois collé multicouche d'au moins 30 mm d'épaisseur est nécessaire
- Peut être équipée d'un porte-rouleau 0449120, en option avec protection antibactérienne intégrée 4449120
- Peut être équipé ultérieurement d'un émetteur radio 0449010
- Produit certifié TÜV PRODUCT SERVICE
- Capacité de charge : max. 100 kg selon ISO17966:2016, testé statiquement jusqu'à 150 kg
- Production conforme au règlement (EU) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux
- CE-certifié
- Conforme à la norme ÖNORM B 1600 et DIN 18040
- Le matériel de fixation doit être défini sur le chantier et adapté selon la configuration et la nature de la cloison



Vario

